

STERILE HYPODERMIC SYRINGE (WITH/WITHOUT NEEDLE)

Product Type

Hypodermic Syringe With/Without Needle	Needle Size	Basic UDI-DI : 611800222HYPOSRRGD
Luer 3 parts Syringe 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50/60 ml	18G 21G 22G	
	23G 24G 25G	

Intended Use

- Sterile Hypodermic Syringe for single use intended for the aspiration of fluids or the injection immediately after filling, it is most commonly used for the administration of medications or for blood sampling.

Product Components

Name	Raw material
Barrel	PP - Polypropylene
Plunger	PP - Polypropylene
Gasket	Thermoplastic Elastomer, Latex free
Hypodermic Needle	Stainless Steel, SS304, PP - Polypropylene
Packaging	Medical grade paper and transparent film for EtO (individually blister packed)

Instructions for Use

- Inspect package for integrity and expiry and then remove the syringe from package using aseptic technique.
- Select proper size of syringe & needle for injection.
- Carefully select and clean the venipuncture or muscle site.
- Be careful to pull the needle cap straight off to avoid the needle point damage.
- Push and twist the needle clock wise on the syringe tip to seal it firmly and ensure a tight fitting.
- Draw the prescribed dosage into the barrel.
- Push the plunger carefully to take out any air bubbles.
- Inject the patient carefully with the needle.
- Push the Plunger thoroughly to the end of complete injection.
- Withdraw needle from patient.
- Do not recap the needle.
- Pull plunger to full extended position and broke it to prevent any one to use it again.
- Discard the needle after single use to prevent any one to use it again

The electronic version of "IFU/HYPOSRG/001 - Instructions for use" is available at www.immedicare.mq.

STERILE HYPODERMIC SYRINGE (WITH/WITHOUT NEEDLE)

Compatibility with other medical devices

Suitable for use with connectors "EN ISO 80369-7 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 7: Connectors for intravenous or hypodermic applications".

Indications

- Hypodermic syringes with needle are devices used to administer medical products and liquids.
- Syringes are designed to be used for intravenous, intramuscular, subcutaneous and taking blood samples.
- The product shelf life is 5 years.

Contraindications

- Hypodermic syringes with needle should not be used in more than one patient. The product can be used in a one-time sterile condition with a single patient.
- Cleaning or re-sterilization is not possible. It is not intended for use other than its stated intended use.
- Dispose of as medical waste after use.

Cautions

- Do not use the product if the package is damaged.
- Visually inspect that the content of package is complete and the package is undamaged.
- Do not use the product after the expiration date printed on the primary packaging.
- After injection or aspiration, dispose of the product as medical waste.
- The product is for single use only. It cannot be reused or re-sterilized.
- Do not touch the needle tip to prevent contamination/ needle sticks. Skin puncture with a contaminated needle may result in serious illness such as hepatitis, AIDS and known/unknown diseases.
- If the sterile packaging is not used immediately after opening, there is a risk of contamination. Product sterility cannot be maintained, do not use the product.
- Reuse of the product may cause infections, cross-contamination and sepsis.
- Sterile syringes are designed to be used immediately after filling, so do not store the medicine for a long time.
- If any serious incident occurs, it should be reported to the manufacturer and the competent authority

Storage Conditions

- Store in a cool and dry place.
- Keep it away from direct sunlight and moist environment.
- Do not place more than 5 successive boxes on the top of each other.
- The shelf life of product is 5 years.

STERILE HYPODERMIC SYRINGE (WITH/WITHOUT NEEDLE)

Description of Symbols Used

	Manufacturer		Fragile. Handle with care
	Date of manufacture		Keep away from sunlight
	Use-by date		Keep dry
	Batch code		Upper limit of temperature (30°C)
	Catalogue number		Humidity limitation (35% – 65%)
	Medical Device		Do not use if package is damaged and consult instruction for use
	Unique device identifier		Single sterile barrier system
	European Authorized Representative		Do not reuse
	Sterilized using ethylene oxide		Latex free
	Do not resterilize		Non-pyrogenic
	Caution		Consult instruction for use

Manufacturing Site

IM MEDICARE

Address: Lot 21, Parc Industriel Sidi Bou Othmane, 43303, Morocco

Email: contact@immedicare.ma

Phone number: +212 524 320 877

Fax: +212 524 320 629

Website: www.immedicare.ma

SERINGUE HYPODERMIQUE STERILE (AVEC/SANS AIGUILLE)

Type de produit

Seringue hypodermique avec/sans aiguille	Taille de l'aiguille	UDI-DI de base : 611800222HYPOSRGD
Seringue en 3 parties 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50/60 ml	18G 21G 22G	  
	23G 24G 25G	

Utilisation prévue

- Seringue hypodermique stérile à usage unique destinée à l'aspiration de fluides ou à l'injection immédiatement après remplissage, elle est le plus souvent utilisée pour l'administration de médicaments ou pour les prélèvements sanguins.

Composants du produit

Nom	Matières premières
Cylindre	PP - Polypropylène
Piston	PP - Polypropylène
Joint d'étanchéité	Elastomère thermoplastique, sans latex
Aiguille hypodermique	Acier inoxydable, SS304, PP - Polypropylène
Emballage	Papier de grade médicale et film transparent pour EtO (emballés individuellement sous blister)

Mode d'emploi

- Vérifier l'intégrité et la date de péremption de l'emballage, puis retirer la seringue de l'emballage en utilisant une technique aseptique.
- Choisir la taille de seringue et d'aiguille appropriée pour l'injection.
- Sélectionner et nettoyer soigneusement le site de ponction veineuse ou le site musculaire.
- Veillez à retirer le capuchon de l'aiguille pour éviter d'endommager la pointe de l'aiguille.
- Poussez et tournez l'aiguille dans le sens des aiguilles d'une montre sur l'embout de la seringue afin de la sceller fermement et d'assurer une bonne étanchéité.
- Aspirez la dose prescrite dans le corps de la seringue.
- Pousser le piston avec précaution pour éliminer les bulles d'air.
- Injecter le patient avec précaution à l'aide de l'aiguille.
- Pousser le piston à fond jusqu'à ce que l'injection soit complète.
- Retirer l'aiguille du patient.
- Ne pas recapuchonner l'aiguille.
- Tirer le piston jusqu'à ce qu'il soit complètement sorti et le casser pour éviter que quelqu'un ne l'utilise à nouveau.
- Jeter l'aiguille après une seule utilisation pour éviter que quelqu'un ne l'utilise à nouveau.

La version électronique de « IFU/HYPOSRG/001 - Instructions d'usage » est disponible à l'adresse suivante : www.immedicare.ma.

SERINGUE HYPODERMIQUE STERILE (AVEC/SANS AIGUILLE)

Compatibilité avec d'autres dispositifs médicaux

Convient pour une utilisation avec les connecteurs « EN ISO 80369-7 Connecteurs de petit calibre pour liquides et gaz dans les applications de soins de santé - Partie 7 : Connecteurs pour applications intraveineuses ou hypodermiques ».

Indications

- Les seringues hypodermiques avec aiguille sont des dispositifs utilisés pour administrer des produits médicaux et des liquides.
- Les seringues sont conçues pour être utilisées par voie intraveineuse, intramusculaire, sous-cutanée et pour prélever des échantillons de sang.

Contre-indications

- Les seringues hypodermiques avec aiguille ne doivent pas être utilisées pour plus d'un patient. Le produit peut être utilisé une seule fois en condition stérile avec un seul patient.
- Le nettoyage ou la stérilisation ne sont pas possibles. Le produit n'est pas destiné à un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
- Après utilisation, le produit doit être éliminé comme un déchet médical.

Précautions

- Ne pas utiliser le produit si l'emballage est endommagé.
- Vérifier visuellement que le contenu de l'emballage est complet et que l'emballage n'est pas endommagé.
- Ne pas utiliser le produit après la date de péremption imprimée sur l'emballage primaire.
- Après injection ou aspiration, éliminer le produit comme un déchet médical.
- Le produit est à usage unique. Il ne peut être ni réutilisé ni re-stérilisé.
- Ne pas toucher la pointe de l'aiguille afin d'éviter toute contamination ou piqûre d'aiguille. Une piqûre de peau avec une aiguille contaminée peut entraîner des maladies graves telles que l'hépatite, le SIDA et des maladies connues/inconnues.
- Si l'emballage stérile n'est pas utilisé immédiatement après l'ouverture, il y a un risque de contamination. Si la stérilité du produit ne peut être maintenue, n'utilisez pas le produit.
- La réutilisation du produit peut entraîner des infections, une contamination croisée et une septicémie.
- Les seringues stériles sont conçues pour être utilisées immédiatement après avoir été remplies ; ne conservez donc pas le médicament pendant une longue période.
- Tout incident grave doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente.

Conditions de stockage

- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil et de l'environnement humide.
- Ne pas placer plus de 5 boîtes successives l'une sur l'autre.
- La durée de conservation du produit est de 5 ans.

SERINGUE HYPODERMIQUE STERILE (AVEC/SANS AIGUILLE)

Description des symboles utilisés

	Fabricant		Fragile. A manipuler avec précaution
	Date de fabrication		Tenir à l'écart de la lumière du soleil
	Date limite d'utilisation		Conserver au sec
LOT	Code du lot		Limite supérieure de température (30°C)
REF	Numéro de catalogue		Limitation de l'humidité (35 % - 65 %)
MD	Dispositif médical		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi
UDI	Identifiant unique du dispositif		Système de barrière stérile simple
EC REP	Représentant autorisé européen		Ne pas réutiliser
STERILE EO	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène		Sans latex
	Ne pas restériliser		Non pyrogène
	Avertissement		Consulter le mode d'emploi

Site de production

IM MEDICARE

Adresse : Lot 21, Parc Industriel Sidi Bou Othmane, 43303, Maroc

Email : contact@immedicare.ma

Numéro de téléphone : +212 524 320 877

Fax : +212 524 320 629

Site web : www.immedicare.ma

JERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL (CON/SIN AGUJA)

Tipo de producto

Jeringa hipodérmica con/sin aguja	Tamaño de la aguja	UDI-DI básico : 611800222HYPOSRGGD
Jeringa Luer 3 piezas 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50/60 ml	18G 21G 22G	
	23G 24G 25G	

Uso previsto

- Jeringa hipodérmica estéril de un solo uso destinada a la aspiración de fluidos o la inyección inmediatamente después del llenado, se utiliza más comúnmente para la administración de medicamentos o para la toma de muestras de sangre.

Componentes del producto

Nombre	Materia prima
Barril	PP - Polipropileno
Émbolo	PP - Polipropileno
Junta	Elastómero termoplástico, sin látex
Aguja hipodérmica	Acero inoxidable, SS304, PP - Polipropileno
Embalaje	Papel de grado médico y film transparente para EtO (envasados individualmente en blíster)

Instrucciones de uso

- Compruebe la integridad y la fecha de caducidad del envase y, a continuación, extraiga la jeringa del envase utilizando una técnica aséptica.
- Seleccionar la jeringa y el tamaño de aguja adecuados para la inyección.
- Seleccione y limpie cuidadosamente la zona de venopunción o el músculo.
- Asegúrese de retirar el capuchón de la aguja para evitar dañar la punta de la aguja.
- Empuje y gire la aguja en el sentido de las agujas del reloj en la punta de la jeringa para cerrarla firmemente y asegurar un buen sellado.
- Introduzca la dosis prescrita en el cilindro de la jeringa.
- Empuje el émbolo con cuidado para eliminar las burbujas de aire.
- Inyecte con cuidado al paciente utilizando la aguja.
- Empuje el émbolo hasta el fondo hasta completar la inyección.
- Retire la aguja del paciente.
- No vuelva a tapar la aguja.
- Tire del émbolo hasta el final y rómpalo para evitar que se vuelva a utilizar.
- Deseche la aguja después de un solo uso para evitar que se vuelva a utilizar.

La versión electrónica de «IFU/HYPOSRG/001 - Instrucciones de uso» está disponible en la siguiente dirección: www.immedicare.ma.

JERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL (CON/SIN AGUJA)

Compatibilidad con otros productos sanitarios

Apto para uso con «EN ISO 80369-7 Conectores de pequeño diámetro para líquidos y gases en aplicaciones sanitarias - Parte 7: Conectores para aplicaciones intravenosas o hipodérmicas».

Indicaciones

- Las jeringuillas hipodérmicas con aguja son dispositivos utilizados para administrar productos médicos y líquidos.
- Las jeringuillas están diseñadas para utilizarse por vía intravenosa, intramuscular, subcutánea y para extraer muestras de sangre.

Contraindicaciones

- Las jeringas hipodérmicas con aguja no deben utilizarse para más de un paciente. El producto sólo puede utilizarse una vez en condiciones estériles con un único paciente.
- No es posible su limpieza o reesterilización. El producto no está destinado a un uso distinto de aquel para el que ha sido diseñado.
- Tras su uso, el producto debe eliminarse como residuo médico.

Precauciones

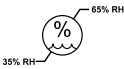
- No utilice el producto si el envase está dañado.
- Compruebe visualmente que el contenido del envase está completo y que el envase no está dañado.
- No utilizar el producto después de la fecha de caducidad impresa en el envase primario.
- Tras la inyección o aspiración, desechar el producto como residuo médico.
- El producto es de un solo uso. No puede reutilizarse ni reesterilizarse.
- No toque la punta de la aguja para evitar la contaminación o el pinchazo. Un pinchazo en la piel con una aguja contaminada puede provocar enfermedades graves como hepatitis, SIDA y enfermedades conocidas/desconocidas.
- Si no se utiliza el envase estéril inmediatamente después de abrirlo, existe riesgo de contaminación. Si no se puede mantener la esterilidad del producto, no lo utilice.
- La reutilización del producto puede provocar infecciones, contaminación cruzada y septicemia.
- Las jeringuillas estériles están diseñadas para ser utilizadas inmediatamente después de su llenado, por lo que no se debe almacenar el medicamento durante un periodo prolongado.
- Cualquier incidente grave debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente.

Condiciones de almacenamiento

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Mantener alejado de la luz solar directa y de la humedad.
- No colocar más de 5 cajas una encima de otra.
- El producto tiene una caducidad de 5 años.

JERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL (CON/SIN AGUJA)

Descripción de los símbolos utilizados

	Fabricante		Frágil. Manipular con cuidado
	Fecha de fabricación		Mantener alejado de la luz solar
	Fecha de caducidad		Mantener seco
LOT	Código de lote		Límite superior de temperatura (30°C)
REF	Número de catálogo		Límite de humedad (35% - 65%)
MD	Producto sanitario		No utilizar si el envase está dañado y consultar las instrucciones de uso
UDI	Identificador único del producto		Sistema de barrera estéril único
EC REP	Representante europeo autorizado		No reutilizar
STERILE EO	Esterilizado con óxido de etileno		Sin látex
	No reesterilizar		No pirogénico
	Precaución		Consultar instrucciones de uso

Lugar de fabricación

IM MEDICARE

Dirección: Lot 21, Parc Industriel Sidi Bou Othmane, 43303, Marruecos

Correo electrónico: contact@immedicare.ma

Teléfono: +212 524 320 877

Fax: +212 524 320 629

Página web: www.immedicare.ma

SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL (COM/SEM AGULHA)

Tipo de produto

Seringue hypodermique avec/sans aiguille	Taille de l'aiguille	UDI-DI de base : 611800222HYPOSRGGD
Seringue en 3 parties 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50/60 ml	18G 21G 22G	 
	23G 24G 25G	

Utilização prevista

• Seringa hipodérmica estéril de utilização única destinada à aspiração de fluidos ou à injeção imediatamente após o enchimento, é mais frequentemente utilizada para a administração de medicamentos ou para recolha de sangue.

Componentes do produto

Nome	Matéria-prima
Barril	PP - Polipropileno
Êmbolo	PP - Polipropileno
Selo	Elastómero termoplástico, sem látex
Agulha hipodérmica	Aço inoxidável, SS304, PP - Polipropileno
Embalagem	Papel de qualidade médica e película aderente EtO (embalados individualmente em blister)

Instruções de utilização

- Verificar a integridade da embalagem e o prazo de validade e, em seguida, retirar a seringa da embalagem utilizando uma técnica asséptica.
- Selecionar a seringa e o tamanho da agulha adequados para a injeção.
- Selecionar e limpar cuidadosamente o local de punção venosa ou muscular.
- Certifique-se de que retira a tampa da agulha para evitar danificar a ponta da agulha.
- Empurrar e rodar a agulha no sentido dos ponteiros do relógio sobre a ponta da seringa para a selar firmemente e garantir uma boa vedação.
- Introduzir a dose prescrita no corpo da seringa.
- Empurrar o êmbolo com cuidado para remover quaisquer bolhas de ar.
- Injetar cuidadosamente o doente com a agulha.
- Empurrar o êmbolo até ao fim da injeção.
- Retirar a agulha do doente.
- Não voltar a colocar a agulha.
- Puxar o êmbolo até ao fim e parti-lo para evitar que volte a ser utilizado.
- Deitar fora a agulha após uma única utilização para evitar que volte a ser utilizada.

A versão eletrónica de "IFU/HYPOSRG/001 - Instruções de utilização" está disponível no seguinte endereço: www.immedicare.ma.

SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL (COM/SEM AGULHA)

Compatibilidade com outros dispositivos médicos

Adequado para utilização com a norma "EN ISO 80369-7 Conectores de pequeno diâmetro para líquidos e gases em aplicações de cuidados de saúde - Parte 7: Conectores para aplicações intravenosas ou hipodérmicas".

Indicações

- As seringas hipodérmicas com agulha são dispositivos utilizados para administrar produtos médicos e líquidos.
- As seringas são concebidas para aplicações intravenosas, intramusculares, subcutâneas e de recolha de sangue.

Contra-indicações

- As seringas hipodérmicas com agulha não devem ser utilizadas em mais do que um doente. O produto só pode ser utilizado uma vez, em condições estéreis, num único doente.
- Não é possível efetuar a limpeza ou a reesterilização. O produto não se destina a uma utilização diferente daquela para que foi concebido.
- Após a utilização, o produto deve ser eliminado como lixo hospitalar.

Precauções

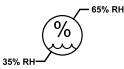
- Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada.
- Verificar visualmente se o conteúdo da embalagem está completo e se a embalagem não está danificada.
- Não utilizar o produto após o prazo de validade impresso na embalagem primária.
- Após injeção ou aspiração, eliminar o produto como lixo hospitalar.
- O produto destina-se a uma única utilização. Não pode ser reutilizado ou reesterilizado.
- Não tocar na ponta da agulha para evitar contaminação ou picada de agulha. Uma punção cutânea com uma agulha contaminada pode provocar doenças graves, como a hepatite, a SIDA e doenças conhecidas/desconhecidas.
- Se a embalagem esterilizada não for utilizada imediatamente após a abertura, existe o risco de contaminação. Se a esterilidade do produto não puder ser mantida, não o utilize.
- A reutilização do produto pode provocar infeções, contaminação cruzada e septicemia.
- As seringas estéreis foram concebidas para serem utilizadas imediatamente após o enchimento, pelo que não se deve armazenar o medicamento durante um período prolongado.
- Qualquer incidente grave deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente.

Condições de armazenamento

- Armazenar num local fresco e seco.
- Manter afastado da luz solar direta e de condições de humidade.
- Não colocar mais de 5 caixas umas em cima das outras.
- O produto tem um prazo de validade de 5 anos.

SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL (COM/SEM AGULHA)

Descrição dos símbolos utilizados

	Fabricante		Frágil. Manusear com cuidado
	Data de fabrico		Manter afastado da luz solar
	Data limite de utilização		Manter seco
LOT	Código do lote		Limite superior de temperatura (30°C)
REF	Número de catálogo		Limitação da humidade (35% - 65%)
MD	Dispositivo médico		Não utilizar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de utilização
UDI	Identificador único do dispositivo		Sistema de barreira estéril única
EC REP	Representante Autorizado Europeu		Não reutilizar
STERILE EO	Esterilizado com óxido de etileno		Sem látex
	Não reesterilizar		Não pirogénico
	Cuidado		Consultar instruções de utilização

Local de fabrico

IM MEDICARE

Endereço: Lot 21, Parc Industriel Sidi Bou Othmane, 43303, Marrocos

Correio eletrónico: contact@immedicare.ma

Número de telefone: +212 524 320 877

Fax: +212 524 320 629

Sítio Web: www.immedicare.ma