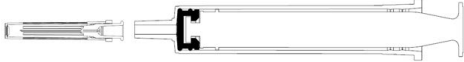


INSULIN SYRINGE

Product Type

Insulin Syringe	Needle Size	Basic UDI-DI : 611800222SYRINSBL
Luer 3 parts Syringe 0.5 ml, 1 ml	29G 30G 31G	

Intended Use

• A sterile device intended to administer insulin injection to a patient subcutaneously. It can be used by healthcare personnel or patients. It will allow for the aspiration of the pharmaceutical from its container for direct administration to the patient subcutaneously. This is a single-use device.

Product Components

Name	Raw material
Barrel	PP - Polypropylene
Plunger	PP - Polypropylene
Gasket	Thermoplastic Elastomer, Latex free
Hypodermic Needle	Stainless Steel, SS304, PP - Polypropylene
Packaging	Medical grade paper and transparent film for EtO (individually blister packed)

Instructions for Use

- Inspect the package for integrity and expiry. Remove the insulin syringe from the package.
 - To expose the needle, twist the protective cap to break the seal. Pull the cap straight off, being careful not to bend the needle or damage its point.
 - To measure the correct dose, align the top edge of the plunger with your dosage on the insulin syringe scale.
- After injection, destroy the syringe needle and place it in a container for safe disposal to prevent misuse.
- Discard the insulin syringe after one use. It is extremely difficult to clean properly after exposure to biological materials, which may cause adverse patient reactions if reused. Cleaning may alter the device's structural integrity.
- The electronic version of "IFU/SYRINS/001 - Instructions for use" is available at www.immedicare.ma.

INSULIN SYRINGE

Steps for Using the Insulin Syringe



Step 1: Open package by peeling back paper and remove syringe carefully.



Step 2: Remove protective needle sheath/cap carefully to avoid needle point damage.



Step 3: Draw up medication and administer injection using an aseptic technique in accordance with your facility's protocol.



Step 4: Once the insulin syringe used, immediately dispose of syringe in an approved sharps disposal Container.

Compatibility with other medical devices

Suitable for use with connectors "EN ISO 80369-7 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 7: Connectors for intravenous or hypodermic applications".

Indications

- Insulin syringes with needle are devices used to administer medical products and liquids.

Contraindications

- Device must not be used other than as indicated in the intended use.
- Device should not be used for the administration of blood and blood components.
- Device should not be used for large volume fluids and fluid derivatives.
- Device should not be used for the administration of high viscous fluids.
- Device should not be used on patients with known hypersensitivity to device material.

Cautions

- Device is for single use only.
- Device must not be reused. Reuse of the device may cause serious infection, cross-contamination, and transmission of bacteria, viruses, and blood-related diseases.
- Ensure before use that the device/packaging is not tampered with or damaged.
- Device is for manual use only.

Storage Conditions

- Store in a cool and dry place.
- Keep it away from direct sunlight and moist environment.
- Do not place more than 5 successive boxes on the top of each other.
- The shelf life of product is 5 years.

INSULIN SYRINGE

Description of Symbols Used

	Manufacturer		Fragile. Handle with care
	Date of manufacture		Keep away from sunlight
	Use-by date		Keep dry
LOT	Batch code		Upper limit of temperature (30°C)
REF	Catalogue number		Humidity limitation (35% – 65%)
MD	Medical Device		Do not use if package is damaged and consult instruction for use
UDI	Unique device identifier		Single sterile barrier system
EC REP	European Authorized Representative		Do not reuse
STERILE EO	Sterilized using ethylene oxide		Latex free
	Do not resterilize		Non-pyrogenic
	Caution		Consult instruction for use

Manufacturing Site

IM MEDICARE

Address: Lot 21, Parc Industriel Sidi Bou Othmane, 43303, Morocco

Email: contact@immedicare.ma

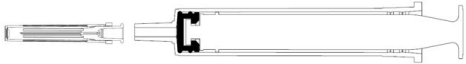
Phone number: +212 524 320 877

Fax: +212 524 320 629

Website: www.immedicare.ma

SERINGUE À INSULINE

Type de produit

Seringue à Insuline	Taille de l'aiguille	UDI-DI de base : 611800222SYRINSBL
Seringue en 3 parties 0.5 ml, 1 ml	29G 30G 31G	

Utilisation prévue

• Dispositif stérile destiné à administrer une injection d'insuline à un patient par voie sous-cutanée. Il peut être utilisé par le personnel soignant ou les patients. Il permet d'aspirer le produit pharmaceutique de son contenant pour l'administrer directement au patient par voie sous-cutanée. Il s'agit d'un dispositif à usage unique.

Composants du produit

Nom	Matières premières
Cylindre	PP - Polypropylène
Piston	PP - Polypropylène
Joint d'étanchéité	Elastomère thermoplastique, sans latex
Aiguille hypodermique	Acier inoxydable, SS304, PP - Polypropylène
Emballage	Papier de grade médicale et film transparent pour EtO (emballés individuellement sous blister)

Instructions d'usage

- Vérifiez l'intégrité et la date de péremption de l'emballage. Retirez la seringue d'insuline de l'emballage.
- Pour exposer l'aiguille, tournez le capuchon protecteur pour briser le sceau. Retirez le capuchon en faisant attention de ne pas plier l'aiguille ou d'endommager sa pointe.
- Pour mesurer la dose correcte, alignez le bord supérieur du piston avec votre dose sur l'échelle de la seringue à insuline. Après l'injection, détruisez l'aiguille de la seringue et placez-la dans un conteneur pour qu'elle soit éliminée en toute sécurité afin d'éviter toute utilisation abusive.
- Jetez la seringue à insuline après une seule utilisation. Il est extrêmement difficile de la nettoyer correctement après une exposition à des substances biologiques, qui peuvent provoquer des réactions indésirables chez le patient en cas de réutilisation. Le nettoyage peut altérer l'intégrité structurelle du dispositif.

La version électronique de « IFU/SYRINS/001 - Instructions d'usage » est disponible sur www.immedicare.ma.

SERINGUE À INSULINE

Étapes d'utilisation de la seringue à insuline



Étape 1 : Ouvrez l'emballage en décollant le papier et retirez la seringue avec précaution.



Étape 2 : Retirer la gaine protectrice de l'aiguille/le capuchon avec précaution pour éviter d'endommager la pointe de l'aiguille.



Étape 3 : Préparer les médicaments et les injecter en utilisant une technique aseptique conformément au protocole de l'établissement.



Étape 4 : Une fois la seringue à insuline utilisée, jetez-la immédiatement dans un conteneur approuvé pour l'élimination des objets tranchants.

Compatibilité avec d'autres dispositifs médicaux

Utilisable avec les connecteurs « EN ISO 80369-7 Connecteurs de petit calibre pour liquides et gaz dans les applications de soins de santé - Partie 7 : Connecteurs pour applications intraveineuses ou hypodermiques ».

Indications

• Les seringues à insuline avec aiguille sont des dispositifs utilisés pour administrer des produits médicaux et des liquides.

Contre-indications

- Le dispositif ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans la notice d'utilisation.
- Le dispositif ne doit pas être utilisé pour l'administration de sang et de composants sanguins.
- Le dispositif ne doit pas être utilisé pour l'administration de grands volumes de liquides et de dérivés de liquides.
- Le dispositif ne doit pas être utilisé pour l'administration de liquides très visqueux.
- Le dispositif ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une hypersensibilité connue au matériau du dispositif.

Précautions

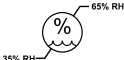
- Le dispositif est à usage unique.
- Il ne doit pas être réutilisé. La réutilisation du dispositif peut entraîner une infection grave, une contamination croisée et la transmission de bactéries, de virus et de maladies liées au sang.
- S'assurer avant utilisation que le dispositif/l'emballage n'a pas été altéré ou endommagé.
- Le dispositif est destiné à un usage manuel uniquement.

Conditions de stockage

- Stocker dans un endroit frais et sec.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil et d'un environnement humide.
- Ne pas placer plus de 5 boîtes successives l'une sur l'autre.
- La durée de conservation du produit est de 5 ans.

SERINGUE À INSULINE

Description des symboles utilisés

	Fabricant		Fragile. A manipuler avec précaution
	Date de fabrication		Tenir à l'écart de la lumière du soleil
	Date limite d'utilisation		Conserver au sec
LOT	Code du lot		Limite supérieure de température (30°C)
REF	Numéro de catalogue		Limitation de l'humidité (35 % - 65 %)
MD	Dispositif médical		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi
UDI	Identifiant unique du dispositif		Système de barrière stérile simple
EC REP	Représentant autorisé européen		Ne pas réutiliser
STERILE EO	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène		Sans latex
	Ne pas restériliser		Non pyrogène
	Avertissement		Consulter le mode d'emploi

Site de production

IM MEDICARE

Adresse : Lot 21, Parc Industriel Sidi Bou Othmane, 43303, Maroc

Email : contact@immedicare.ma

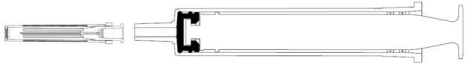
Numéro de téléphone : +212 524 320 877

Fax : +212 524 320 629

Site web : www.immedicare.ma

JERINGA DE INSULINA

Tipo de producto

Jeringa de insulina	Tamaño de la aguja	UDI-DI básico: 611800222SYRINSBL
Jeringa de 3 piezas 0.5 ml, 1 ml	29G 30G 31G	

Uso previsto

• Dispositivo estéril destinado a administrar inyecciones de insulina a un paciente por vía subcutánea. Puede ser utilizado por el personal sanitario o por los pacientes. Permitirá la aspiración del producto farmacéutico de su envase para su administración directa al paciente por vía subcutánea. Se trata de un dispositivo de un solo uso.

Componentes del producto

Nombre	Materia prima
Barril	PP - Polipropileno
Émbolo	PP - Polipropileno
Junta	Elastómero termoplástico, sin látex
Aguja hipodérmica	Acero inoxidable, SS304, PP - Polipropileno
Embalaje	Papel de grado médico y film transparente para EtO (envasados individualmente en blíster)

Instrucciones de uso

- Compruebe la integridad y la caducidad del envase. Saque la jeringa de insulina del envase.
- Para descubrir la aguja, gire el capuchón protector para romper el precinto. Tire del capuchón hacia fuera, con cuidado de no doblar la aguja ni dañar su punta.
- Para medir la dosis correcta, alinee el borde superior del émbolo con su dosis en la escala de la jeringa de insulina. Después de la inyección, destruye la aguja de la jeringa y colócala en un recipiente para desecharla de forma segura y evitar así su uso indebido.
- Deseche la jeringa de insulina después de un uso. Es extremadamente difícil limpiarla adecuadamente tras su exposición a materiales biológicos, que pueden causar reacciones adversas en el paciente si se reutiliza. La limpieza puede alterar la integridad estructural del dispositivo.

La versión electrónica de «IFU/SYRINS/001 - Instrucciones de uso» está disponible en www.immedicare.ma.

JERINGA DE INSULINA

Pasos para utilizar la jeringa de insulina



Paso 1: Abra el envase despegando el papel y extraiga la jeringa con cuidado.



Paso 2: Retire la vaina/capuchón protector de la aguja con cuidado para evitar daños en la punta de la aguja.



Paso 3: Preparar la medicación y administrar la inyección utilizando una técnica aséptica de acuerdo con el protocolo de su centro.



Paso 4: Una vez utilizada la jeringa de insulina, deséchela inmediatamente en un contenedor homologado para residuos punzantes.

Compatibilidad con otros productos sanitarios

Apto para su uso con conectores «EN ISO 80369-7 Conectores de pequeño calibre para líquidos y gases en aplicaciones sanitarias - Parte 7: Conectores para aplicaciones intravenosas o hipodérmicas».

Indicaciones

- Las jeringas de insulina con aguja son dispositivos utilizados para administrar productos médicos y líquidos.

Contraindicaciones

- El producto no debe utilizarse de forma distinta a la indicada en el uso previsto.
- El dispositivo no debe utilizarse para la administración de sangre y componentes sanguíneos.
- El dispositivo no debe utilizarse para la administración de fluidos de gran volumen y derivados de fluidos.
- El dispositivo no debe utilizarse para la administración de fluidos de alta viscosidad.
- El dispositivo no debe utilizarse en pacientes con hipersensibilidad conocida al material del dispositivo.

Precauciones

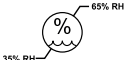
- El dispositivo es de un solo uso.
- No debe reutilizarse. La reutilización del dispositivo puede causar infecciones graves, contaminación cruzada y transmisión de bacterias, virus y enfermedades relacionadas con la sangre.
- Asegúrese antes de utilizarlo de que el dispositivo/envase no está manipulado ni dañado.
- El dispositivo es sólo para uso manual.

Condiciones de almacenamiento

- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Manténgalo alejado de la luz solar directa y de ambientes húmedos.
- No coloque más de 5 cajas sucesivas una encima de otra.
- La vida útil del producto es de 5 años.

JERINGA DE INSULINA

Descripción de los símbolos utilizados

	Fabricante		Frágil. Manipular con cuidado
	Fecha de fabricación		Mantener alejado de la luz solar
	Fecha de caducidad		Mantener seco
LOT	Código de lote		Límite superior de temperatura (30°C)
REF	Número de catálogo		Límite de humedad (35% - 65%)
MD	Producto sanitario		No utilizar si el envase está dañado y consultar las instrucciones de uso
UDI	Identificador único del producto		Sistema de barrera estéril único
EC REP	Representante europeo autorizado		No reutilizar
STERILE EO	Esterilizado con óxido de etileno		Sin látex
	No reesterilizar		No pirogénico
	Precaución		Consultar instrucciones de uso

Lugar de fabricación

IM MEDICARE

Dirección: Lot 21, Parc Industriel Sidi Bou Othmane, 43303, Marruecos

Correo electrónico: contact@immedicare.ma

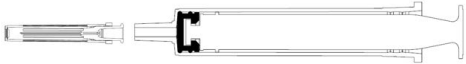
Teléfono: +212 524 320 877

Fax: +212 524 320 629

Página web: www.immedicare.ma

SERINGA DE INSULINA

Tipo de produto

Seringa de insulina	Tamanho da agulha	UDI-DI básico: 611800222SYRINSBL
Seringa de 3 partes 0.5 ml, 1 ml	29G 30G 31G	

Utilização prevista

• Dispositivo estéril destinado a administrar injeções de insulina a um doente por via subcutânea. Pode ser utilizado pelo pessoal de saúde ou pelos doentes. Permite a aspiração do fármaco do seu recipiente para administração direta ao doente por via subcutânea. Trata-se de um dispositivo de utilização única.

Componentes do produto

Nome	Matéria-prima
Barril	PP - Polipropileno
Êmbolo	PP - Polipropileno
Selo	Elastómero termoplástico, sem látex
Agulha hipodérmica	Aço inoxidável, SS304, PP - Polipropileno
Embalagem	Papel de qualidade médica e película aderente EtO (embalados individualmente em blister)

Instruções de utilização

- Inspeccionar a embalagem para verificar a sua integridade e o prazo de validade. Retirar a seringa de insulina da embalagem.
- Para expor a agulha, rodar a tampa de proteção para quebrar o selo. Puxe a tampa a direito, tendo cuidado para não dobrar a agulha ou danificar a sua ponta.
- Para medir a dose correta, alinhe a extremidade superior do êmbolo com a sua dose na escala da seringa de insulina. Após a injeção, destrua a agulha da seringa e coloque-a num recipiente para eliminação segura, para evitar uma utilização incorrecta.
- Deitar fora a seringa de insulina após uma utilização. É extremamente difícil limpá-la adequadamente após a exposição a materiais biológicos, que podem causar reacções adversas nos doentes se forem reutilizados. A limpeza pode alterar a integridade estrutural do dispositivo.

A versão eletrónica de "IFU/SYRINS/001 - Instruções de utilização" está disponível em www.immedicare.ma.

SERINGA DE INSULINA

Passos para utilizar a seringa de insulina



Passo 1: Abrir a embalagem, descascando o papel e retirar cuidadosamente a seringa.



Passo 2: Retirar a bainha/capa protetora da agulha com cuidado para evitar danos na ponta da agulha.



Passo 3: Preparar a medicação e administrar a injeção utilizando uma técnica asséptica de acordo com o protocolo da sua instituição.



Passo 4: Assim que a seringa de insulina for utilizada, eliminar imediatamente a seringa num recipiente aprovado para a eliminação de material médico cortante.

Compatibilidade com outros dispositivos médicos

Adequado para utilização com conectores "EN ISO 80369-7 Conectores de pequeno diâmetro para líquidos e gases em aplicações de cuidados de saúde - Parte 7: Conectores para aplicações intravenosas ou hipodérmicas".

Indicações

• As seringas de insulina com agulha são dispositivos utilizados para administrar produtos médicos e líquidos.

Contra-indicações

- O dispositivo não deve ser utilizado para além do indicado na utilização prevista.
- O dispositivo não deve ser utilizado para a administração de sangue e componentes sanguíneos.
- O dispositivo não deve ser utilizado para fluidos de grande volume e derivados de fluidos.
- O dispositivo não deve ser utilizado para a administração de fluidos com elevada viscosidade.
- O dispositivo não deve ser utilizado em doentes com hipersensibilidade conhecida ao material do dispositivo.

Precauções

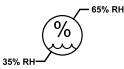
- O dispositivo destina-se a uma única utilização.
- O dispositivo não deve ser reutilizado. A reutilização do dispositivo pode causar infecções graves, contaminação cruzada e transmissão de bactérias, vírus e doenças relacionadas com o sangue.
- Antes da utilização, certifique-se de que o dispositivo/embalagem não está adulterado ou danificado.
- O dispositivo destina-se apenas a utilização manual.

Condições de armazenamento

- Armazenar num local fresco e seco.
- Manter afastado da luz solar direta e de ambientes húmidos.
- Não colocar mais de 5 caixas sucessivas umas em cima das outras.
- O prazo de validade do produto é de 5 anos.

SERINGA DE INSULINA

Descrição dos símbolos utilizados

	Fabricante		Frágil. Manusear com cuidado
	Data de fabrico		Manter afastado da luz solar
	Data limite de utilização		Manter seco
LOT	Código do lote		Limite superior de temperatura (30°C)
REF	Número de catálogo		Limitação da humidade (35% - 65%)
MD	Dispositivo médico		Não utilizar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de utilização
UDI	Identificador único do dispositivo		Sistema de barreira estéril única
EC REP	Representante Autorizado Europeu		Não reutilizar
STERILE EO	Esterilizado com óxido de etileno		Sem látex
	Não reesterilizar		Não pirogénico
	Cuidado		Consultar instruções de utilização

Local de fabrico

IM MEDICARE

Endereço: Lot 21, Parc Industriel Sidi Bou Othmane, 43303, Marrocos

Correio eletrónico: contact@immedicare.ma

Número de telefone: +212 524 320 877

Fax: +212 524 320 629

Sítio Web: www.immedicare.ma